

ZEISS IOLMaster 700セキュリティアップデート (“PrintNightmare”)



ZEISS IOLMaster 700セキュリティアップデート (“PrintNightmare”)

ご注意ください: 本書類は、機器に付属のユーザーマニュアルに代わるものではありません。

アップデートに関して

"PrintNightmare"は、Microsoft Windows OSで動作する機器に影響を与えるセキュリティの脆弱性の名称です。Microsoftによると、「Windows Print Spooler Serviceが特定の権限で不適切なファイル操作を実行すると、リモートデコードが実行される脆弱性が存在します。この脆弱性を悪用した攻撃者は、SYSTEM権限で任意のコードを実行する必要があります。攻撃者はプログラムをインストールし、データを表示、変更または削除し、あるいは無制限のユーザー権限で新しいアカウントをする可能性があります。」

"PrintNightmare"はZEISS IOLMaster 700のセキュリティや機能に影響を及ぼしません。それでもなお、機器のセキュリティアップデート（パッチ）を提供し、"PrintNightmare"のセキュリティの脆弱性を解消します。

必要な記憶媒体

アップデートをインストール前にダウンロードするためには、2 GB以上のUSBメモリスティックが必要です。

準備

- 次のファイルをダウンロードし、USBスティックのルートディレクトリに直接保存します：
- 000000-2485-398_Vs01_IOLMaster700UpdateOperatingSystem.upt


IOLMaster 700へのアップデートのインストール方法




1. IOLMasterのスイッチをオフにします。
2. IOLMasterのスイッチをオンにします。
3. ログオン画面を呼び出します。
4. 「管理者」としてログオンします。



5. ソフトウェアアップデートが保存されているUSBスティックをIOLMasterに接続します。

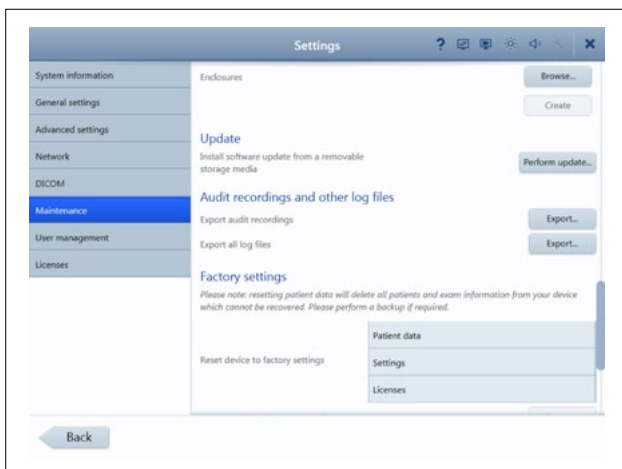


6. 設定を呼び出します (スパナアイコン)。
7. メニュー項目"Maintenance"を呼び出します。
8. "Update"セクションまでスクロールします。
9. "Perform update"をクリックします。

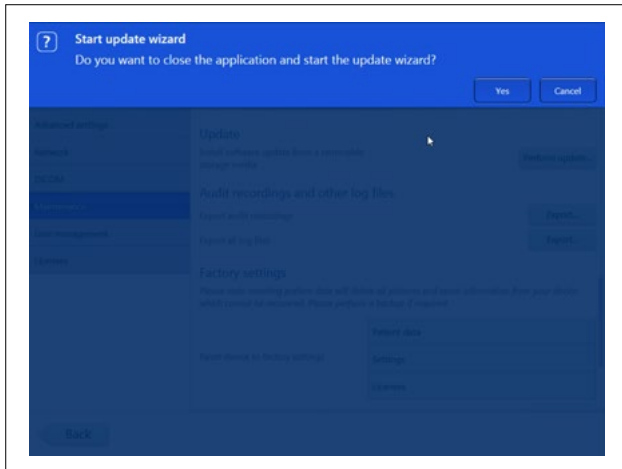

10. ポップアップウィンドウで"Yes"をクリックしてアップデートを開始します。

注: このプロセスは最大1分かかる場合があります。

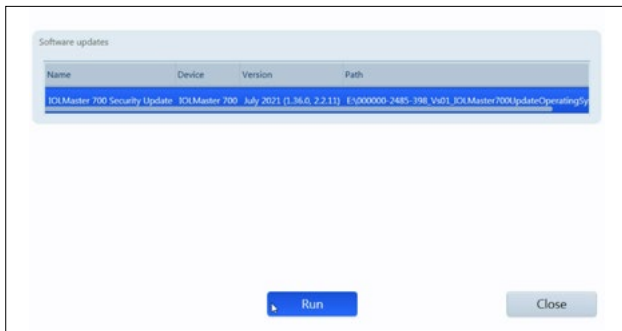


11. リストからソフトウェアアップデートを選択します。

12. "Run" をクリックします。

13. IOLMasterが自動的に再起動します。



14. IOLMasterはソフトウェアアップデートのみをインストールします。このプロセスは5~30分かかります。画面の指示に従って下さい。ソフトウェアアップデートを2回インストールする必要がある場合があります。そのような場合には、IOLMasterはこの2回目のインストールプロセスもガイドします。

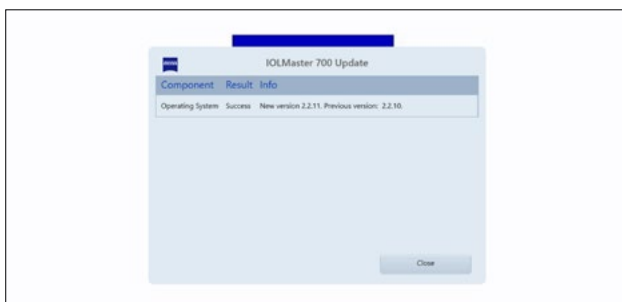

15. アップデートが完了すると、欄外にダイアログウィンドウが開きます。メッセージを読み、システムが正常に更新されたことを確認してください。

16. "Close"をクリックして更新ステップを終了します。

17. IOLMasterが自動的に再起動します。

18. USBスティックを取り外すことができます。

ZEISS製品インサイトで、さらに専門的な動画、ヘルプドキュメント、FAQを確認してください。



ZEISS製品インサイト-ウェブサイト



Carl Zeiss Meditec AG

Göschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena, ドイツ

www.zeiss.com/med

info.meditec@zeiss.com

000000-1932-169-AddGA-JP-260821