



Revival  
Model



# ZEISS OPMI pico with MORA interface

Begin your journey with the Classic.

**時代を超えて、変わらないもの**

20年以上に渡り、歯科臨床を支えてきた手術顕微鏡OPMI pico with MORAインターフェースが復刻しました。

軽量、コンパクト、快適な操作性で、歯科医師による治療だけでなく、歯科衛生士によるメンテナンスにおいても、拡大視野による高い精度を実現します。



Seeing beyond



## MORA インターフェイスとは

顕微鏡歯科治療の先駆者Dr. Assad F. MORA先生が考案したインターフェイス。顕微鏡基を左右に振っても接眼レンズ部分を水平に保つため、首を傾げずに快適な姿勢で治療に専念できます。顕微鏡全体を動かさないため、すばやく理想的な位置へポジショニングします。

## テクニカルデータ

光学系	T*マルチコートアポクロマート
変倍機構	手動5変倍 (ファクタ0.4/0.6/1.0/1.6/2.5)
フォーカス機構	ノブによる手動操作
観察鏡筒	180° 可変鏡筒
接眼レンズ	広視野接眼レンズ12.5x
対物レンズ	バリオスコープ
フィルタ	UVオレンジ、コントラストグリーン
照明機構	LED照明、ファイバライトガイド同軸
MORAインターフェイス	ビームポート付、左右あおり回転角±25°、焦点深度調整用スイングインダブルアイリス
ハンドグリップ	バック


定格電圧	100V AC, 50/60Hz
最大消費電力	250VA
電撃に対する保護の形式および程度	Class I、B形装着部
重量 (顕微鏡基部を含む)	約90kg(フロアスタンド) 約35kg(ロングアームユニット)

## 希望小売価格


フロアスタンド	3,850,000円
ロングアームユニット	4,100,000円

## 寸法図

### フロアスタンド

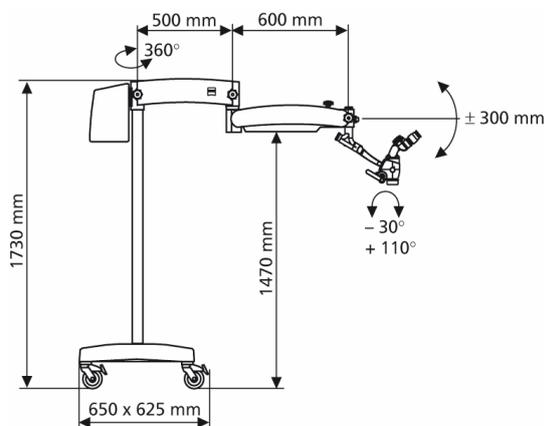

### ロングアームユニット

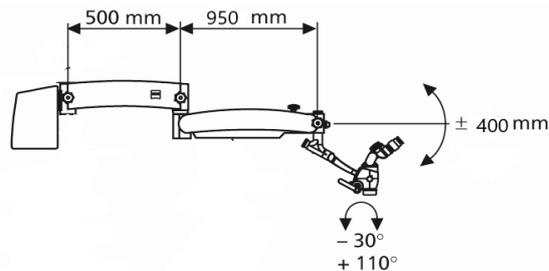

販売名：手術顕微鏡 OPMI pico  
製造販売届出番号：13B1X00119003170

詳しくはCarl Zeiss Meditec(株)へお電話もしくはウェブサイトへ、または弊社製品取扱店へお問合せください。

## 製造販売元

### Carl Zeiss Meditec株式会社

〒102-0083  
東京都千代田区麹町二丁目10番9号  
TEL:0570-021311  
FAX:03-5214-1251

URL <https://www.zeiss.co.jp/med>

●本製品の仕様はお断りなしに変更させていただくことがあります。  
●本カタログ中の製品の色彩は印刷のために実物とは多少異なることがあります。

医家向け

## 発売元