



## i.Profiler® plusで自覚的屈折測定 自動で高次元データを取得

目にしっかり合った見えやすいレンズを作るには、目のより詳細な情報が必要です。i.Profiler® plus は自動的に非常に詳しい視覚プロフィール情報を取得するため、お客様を質問責めにしなくても多くの情報が得られます。

[ハイライト](#)[詳細](#)[i.Scription テクノロジー](#)[お問い合わせ先](#)

i.Profiler® plus は、**波面収差解析、オートレフラクトメーター、ATLAS角膜トポグラフィ、およびケラトメーター**の4機能を<sup>1</sup>台に搭載したコンパクトシステムです。タッチスクリーンによる簡単操作で測定が自動的に行われ、両眼の全ての測定が約60秒で完了します。眼の屈折度数の分布が、瞳孔の開放部全域にわたって把握され、分析されます。i.Profiler® plus による詳細な測定結果は [> i.Scription®](#) テクノロジーを採用したZEISSレンズに直接反映させることができます。

## 製品の特長



- 高解像度ハルトマンジャック波面センサーによって、直径7ミリメートルに開放された瞳孔が1500ポイントで測定されます。
- 顎受け台の高さが調節可能なので、快適な姿勢で測定できます。
- 完全に自動化された測定手順
- **ZEISS i.Profiler® plus をiPadで操作し、i.Scription® の分析結果をiPad上でデモンストレーションすることが可能です。**
- 測定結果はi.Scription® テクノロジーとしてレンズに反映させることができ、夜間でのより快適な視界を提供します。
- 分かりやすいインターフェイスでデータ取得、評価、表示および解析が容易に行えます。
- タッチスクリーンで簡単に操作でき、両眼の全ての測定が自動で約60秒で



完了します。

- i.Profiler® plusの測定データは、i.Comサーバーのデータ管理システムに保存され、今後のカウンセリングやに活用することができます。


- i.Profiler® plus は高解析の波面測定と角膜形状を把握し、眼の屈折状態を分析するために必要なデータを全て提供します。
- 分析モードは、収差が視覚に与える様々な影響を、7次のゼルニケ収差まで見える化できます。さらに、点広がり表示機能により i.Scription® テクノロジーの利点を分かりやすくシミュレーションすることもできます。

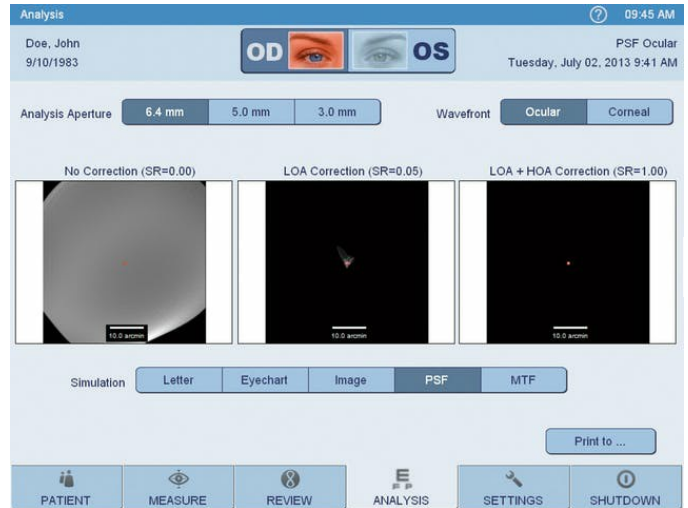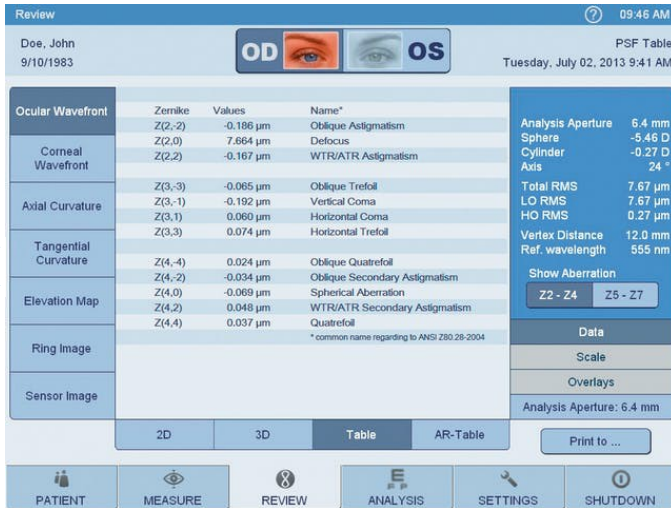

## i.Scription® テクノロジーの導入 ワークフローに簡単かつスムーズに組み込める

i.Scription® テクノロジーは、現行のコンサルテーションプロセスやワークフローに非常に簡単に組み込めます。i.Profiler® plusがあれば、i.Scription® テクノロジーを搭載した精密設計レンズを簡単に作ることができます。

> ZEISSのi.Scription® に関する詳細はこちらから

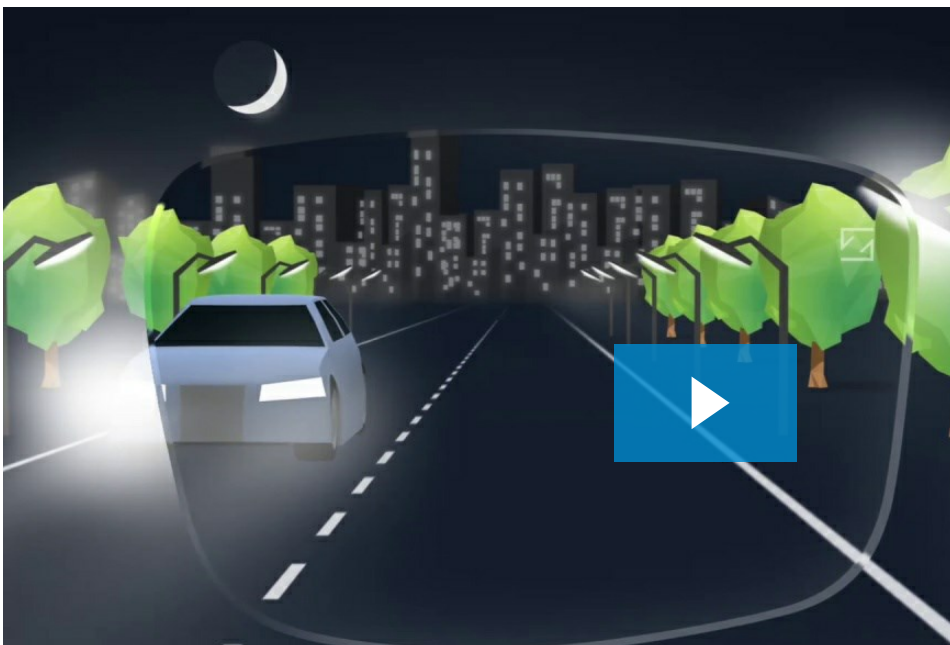

**i.Scription®  
by ZEISS**

**単焦点レンズ(在庫)****単焦点レンズ(特注)****遠近両用レンズ**

i.Scription®

テクノロジーを搭載して提供できるレンズ

-

■

■

ZEISSは世界有数の眼鏡レンズのリーディングサプライヤーとして、最高の精度と快適性を追い求め続けています。ZEISSはレンズ、機器や測定システムを設計、製造すると同時に、販売コンセプトと技術サービスを提供することでビジョンケアのスタンダードを高め続けています。

**お問い合わせはこちら**  
ZEISSカスタマーサービス

[072-493-3507](tel:072-493-3507)



<sup>1</sup> US Patent 7,744,217. Other patents pending. Product designed and manufactured using Carl Zeiss Vision technology. i.Profiler® plus US Patent 7,744,217. Other patents pending. Product designed and manufactured using Carl Zeiss Vision technology.



#### もっと見る

視覚について理解する  
健康と予防  
ライフスタイルとファッション  
運転とモビリティ  
スポーツとレジャー  
仕事

#### 最適なオプションを選ぶ

遠用メガネおよび老眼用メガネ  
遠近両用メガネ  
サングラス  
仕事用メガネ  
スポーツメガネ  
子供用メガネ  
レンズコーティング  
コンタクトレンズ  
レンズクリーニング  
眼鏡店に行く前に

#### サービス

視覚プロフィールチェック  
オンラインビジョンチェック

#### 眼鏡店向け

測定機器とテクノロジー  
ZEISSメガネレンズ  
ZEISSクリーニングソリューション